



amara

go-cups

quick-start guide




Assembly

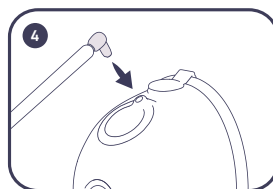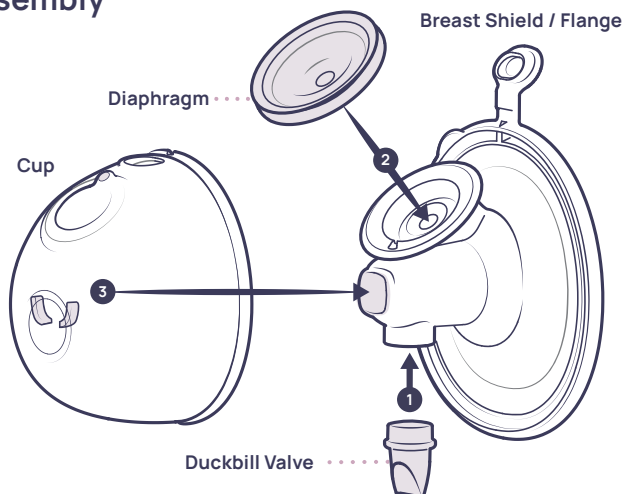

Tubing
Firmly connect the tubing to the tubing port on the cup.

For proper pump connection and use of silicone connector, please refer to the pump compatibility instructions >>>


Wash

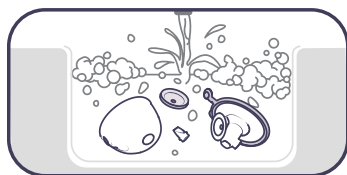


Before first use and after every use, disassemble all cup parts, wash, and boil in water for 10 minutes, ensuring full submersion of parts.



Wash duckbill valve in warm, soapy water, gently rubbing tip. Pinch valve opening closed to straighten it.

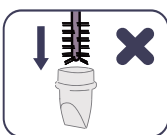

Sanitize

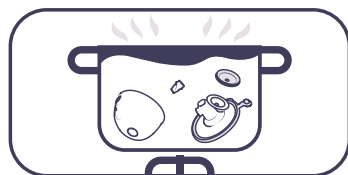

Inspect valve for tears or warping. If damaged or unable to close, replace.

NOTE

- Do not wash or boil tubing. If it becomes visibly dirty, wipe clean with warm, damp cloth.
- Before use, disassemble, wash, and sanitize all parts that may have come into contact with breast or breast milk.
- Ensure all parts have been thoroughly cleaned and are completely dry before use.
- For more detailed use and care instructions, please refer to the User Manual.


Compatibility With Your Pump*

Installation A: No silicone connector required

Spectra **Freemie** **Ardo** **Unimom** **Ameda**


Zomee **Motif** DUO, Luna

- 1 Remove the connector from your pump manufacturer's tubing.
- 2 Place L-shaped connector over your pump manufacturer's tubing.

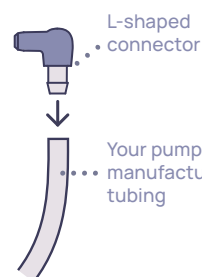


Lansinoh

- 1 Remove the silicone tubing from your pump tubing Y connector.
- 2 Place Go-Cups tubing over your pump tubing Y connector.

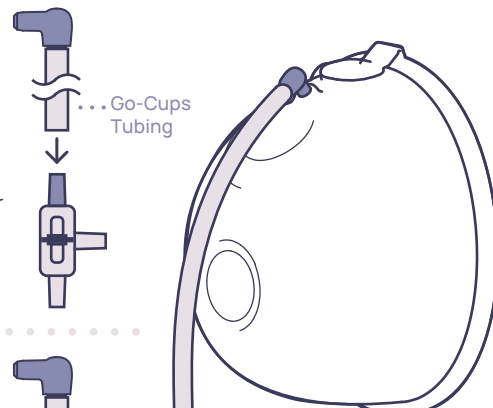

Motif Twist

- 1 Remove the silicone tubing from your pump manufacturer's connector.
- 2 Place Go-Cups tubing over your pump manufacturer's tubing.

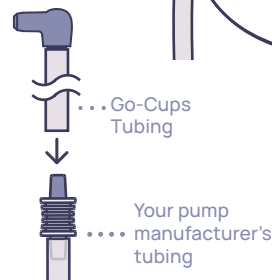


Installation B: Use silicone connector

Medela Freestyle Flex, Pump in Style, Swing Maxi, Sonata

Baby Buddha **Pumpables** Genie Advanced

- 1 Insert L-shaped connector into silicone connector.
- 2 Place silicone connector over your pump manufacturer's tubing.

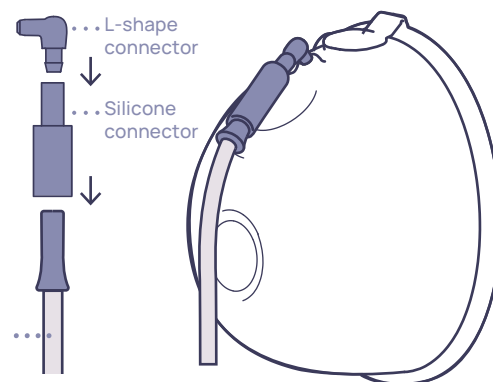

*The desired suction level may vary from your pump collection kits



Scan here for User Manual.



Scan here for cups compatibility and instructions.



amafis

go-cups

guía de inicio rápido




Montaje

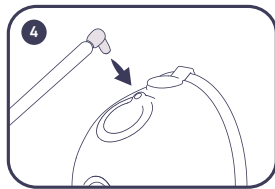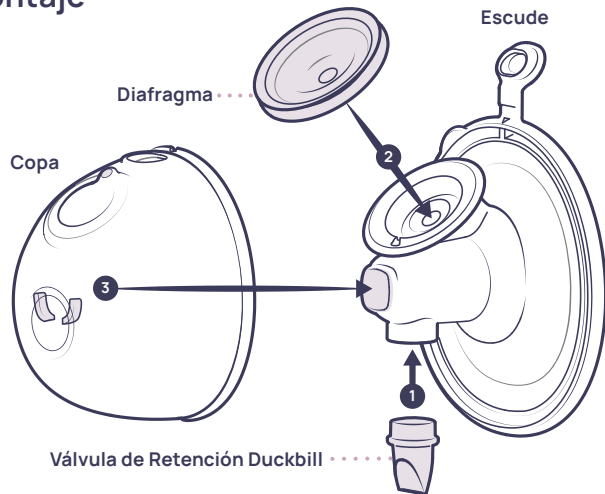


Tubo
Conecta firmemente el tubo al puerto del tubo en la copa.

Para una conexión adecuada del extractor y el uso del conector de silicona, consulta las instrucciones de compatibilidad del extractor >>>

Lavar

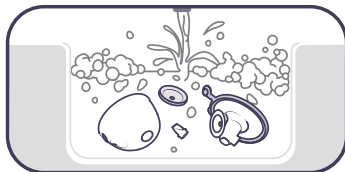


Antes del primer uso y después de cada uso, desarma todas las piezas de la copa, lávalas y hiérvelas en agua durante 10 minutos, asegurando que queden completamente sumergidas.

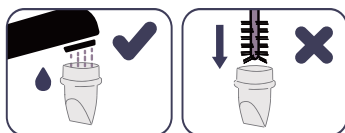

Lava la válvula tipo pico de pato con agua tibia y jabón, frotando suavemente la punta. Pellizca la abertura de la válvula para enderezarla.

Desinfectar

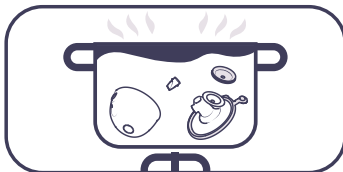

Inspecciona la válvula en busca de desgarros o deformaciones. Si está dañada o no se puede cerrar, reemplázala.

NOTA

- No laves ni hiervas el tubo. Si se ensucia visiblemente, límpialo con un paño húmedo y tibio.
- Antes de usar, desarma, lava y desinfecta todas las piezas que hayan podido entrar en contacto con el pecho o la leche materna.
- Asegúrate de que todas las piezas estén completamente limpias y secas antes de su uso.
- Para instrucciones más detalladas de uso y cuidado, consulta el Manual de Usuario.

Compatibilidad Con Tu Extractor*

Instalación A: No se requiere conector de silicona

Spectra **Freemie** **Ardo** **Unimom** **Ameda**


Zomee **Motif** DUO, Luna

- Retira el conector del tubo del fabricante de tu extractor.
- Coloca el conector en forma de L sobre el tubo del fabricante de tu extractor.




Lansinoh

- Retira el tubo de silicona del conector en Y de tu extractor.
- Coloca el tubo de los Go-Cups sobre el conector en Y del tubo de tu extractor.

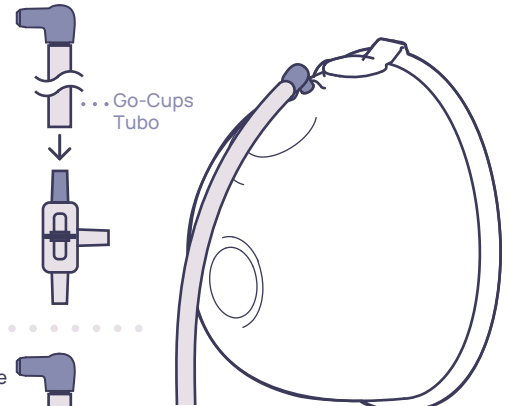

Motif Twist

- Retira el tubo de silicona del conector del fabricante de tu extractor.
- Coloca el tubo de los Go-Cups sobre el tubo del fabricante de tu extractor.

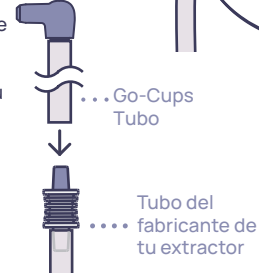


Instalación B: Usar conector de silicona

Medela Freestyle Flex, Pump in Style, Swing Maxi, Sonata

Baby Buddha **Pumpables** Genie Advanced

- Inserta el conector en forma de L dentro del conector de silicona.
- Coloca el conector de silicona sobre el tubo del fabricante de tu extractor.

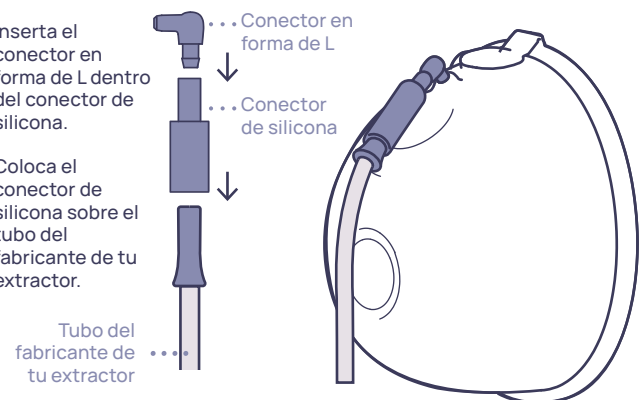

*El nivel de succión deseado puede variar según los kits de recolección de tu extractor.



Escanea aquí para el Manual de Usuario.



Escanea aquí para compatibilidad de copas e instrucciones.