


amaris

slim-cups


quick-start guide





Assembly

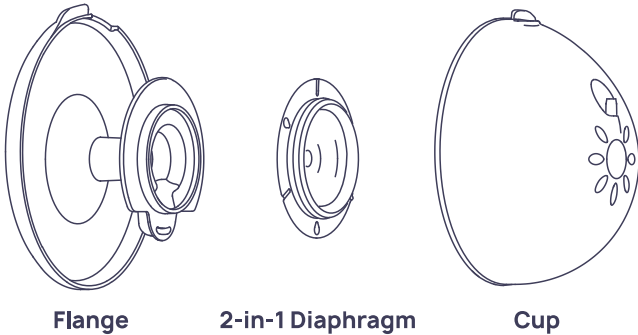


Your Amaris Slim-Cups feature a unique diaphragm designed for up to three replacement cycles before needing a full replacement. If you notice reduced suction or lower milk output, simply rotate the diaphragm to the next numbered droplet or replace it.

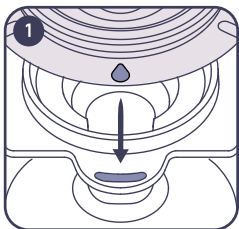


Align the numbered droplet on the diaphragm to the valve outlet on the flange. Secure by pressing around the edges of the inner circle of the flange.

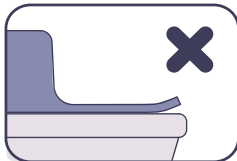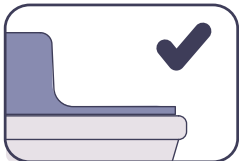


Note: Make sure the diaphragm is flat against the flange and not lifted to promote strong suction.

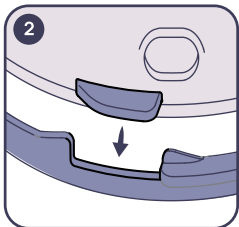

Next, take the collection cup and align the tab to the open notch located on the flange and secure.

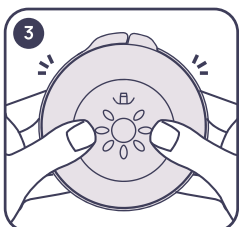

Use both hands to tightly reinforce the flange and cup, applying pressure with your palms around the outer edge, ensuring a snug fit to prevent leakage.

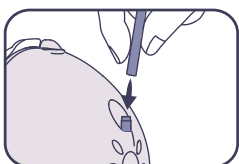

Tubing
For proper tubing connection and use of the silicone connector, please refer to the pump compatibility instructions > >

Wash



Wash before first use and after use.

Sanitize



Sanitize before first use and once per day after use.

Note

- Do NOT wash or boil the tubing. If it becomes visibly dirty, wipe it clean with a warm, damp cloth.
- Before use, wash and sanitize all parts that may come in contact with the breast or breast milk.
- For best results, pump parts should be completely dry before use.
- For more detailed use and care instructions, please refer to the User Manual.



Please refer to the online User Manual for details




Scan code to watch assembly tutorial

Compatibility with your pump

Installation A: No Silicone Connector Required

Baby Buddha **Freemie** **Unimom** **Zomee** **Motif** DUO, Luna


Pumpables Genie Advanced, Genie Plus

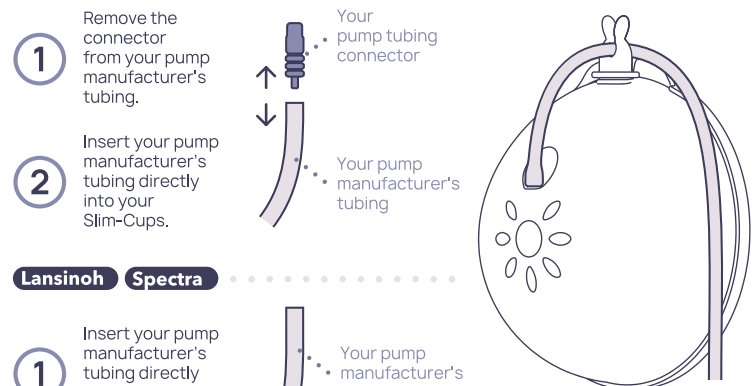


Lansinoh **Spectra**



Motif Twist

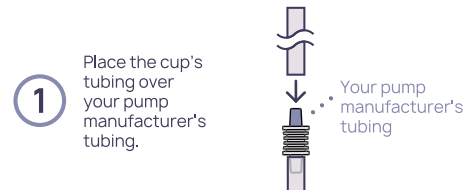

Ardo **Ameda** Mya Joy

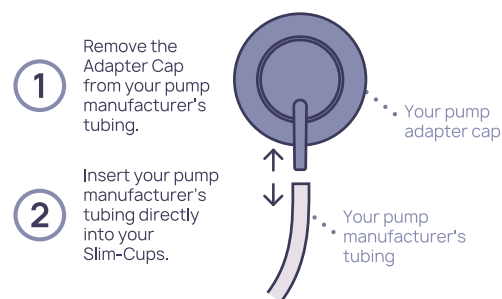


Installation B: Silicone Connector Required

Medela Freestyle Flex, Pump in Style (slimeinate MF), Swing Maxi, Sonata

Pumpables Genie Advanced, Genie Plus

Baby Buddha

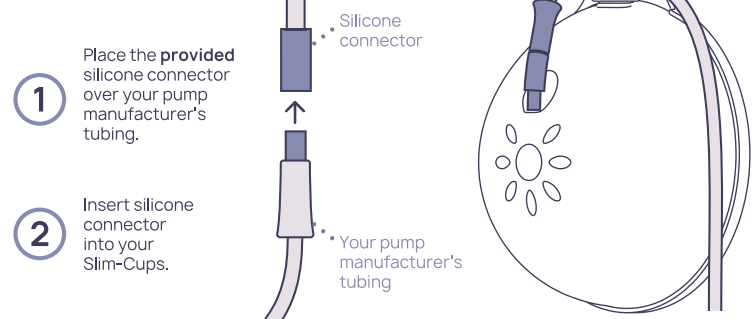


amartís

slim-cups

guía de inicio rápido




Montaje

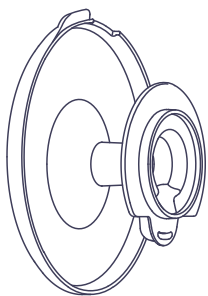

Escude


2-in-1 Diafragma

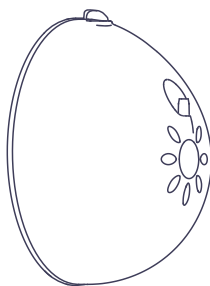


Copa




Tus Amarts Slim-Cups cuentan con un diafragma único diseñado para hasta tres ciclos de reemplazo antes de necesitar un reemplazo completo. Si notas una succión reducida o una menor producción de leche, simplemente gira el diafragma hacia la siguiente gota numerada o reemplázalo.

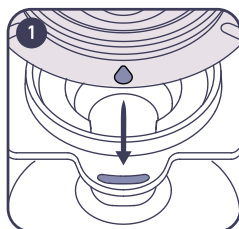


Alinea la marca de la gota de agua con la salida. Coloca el diafragma sobre el protector de pecho y presiona alrededor del borde del diafragma completamente para un ajuste seguro.

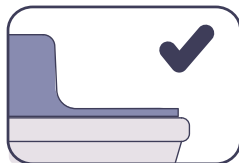


Nota: Asegúrate de que el tallo esté ajustado contra la abertura de la válvula.

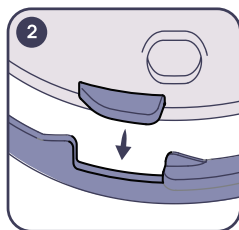

Confirma que la base del protector de pecho esté alineada correctamente con la copa.

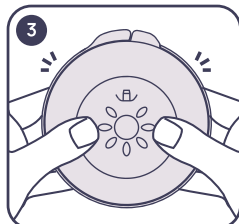

Coloque la copa y el protector de pecho juntos y presione alrededor de los bordes del protector de pecho para asegurarse de que el ajuste esté ajustado contra la copa.

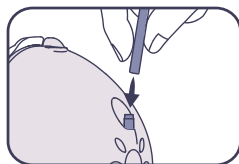

Tubos


Para una conexión correcta del tubo y el uso del conector de silicona, consulte las instrucciones de compatibilidad del extractor >>>

Lavar



Antes del primer uso y después de cada uso.

Desinfectar

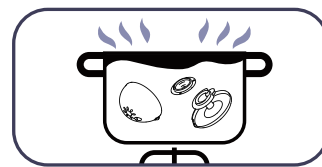

Antes del primer uso y una vez al día y una vez al día después de su uso.

Nota

- No lave ni hierva el tubo. Si se ensucia visiblemente, límpiolo con un paño caliente y húmedo.
- Lave y desinfecte todas las partes antes del primer uso.
- Asegúrese de que estén completamente secas antes de usarlas.
- Consulte el Manual del usuario para obtener instrucciones detalladas sobre el uso y el cuidado.



Antes de extraerse la leche por primera vez, lea las instrucciones de uso de su producto.




Escanee el código para ver el tutorial de ensamblaje.

Compatibilidad con su extractor.

Instalación A: No requiere conector de silicona.

Baby Buddha **Freemie** **Unimom** **Zomee** **Motif** DUO, Luna


Pumpables Genie Advanced, Genie Plus

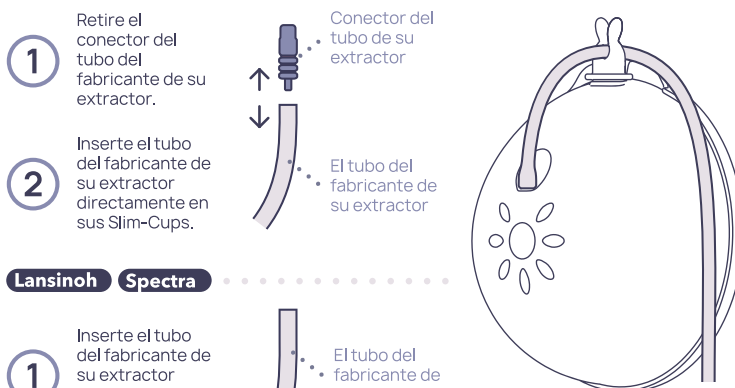


Lansinoh **Spectra**



Motif Twist

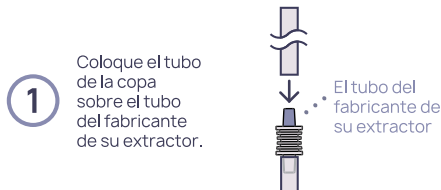

Ardo **Ameda** Mya Joy

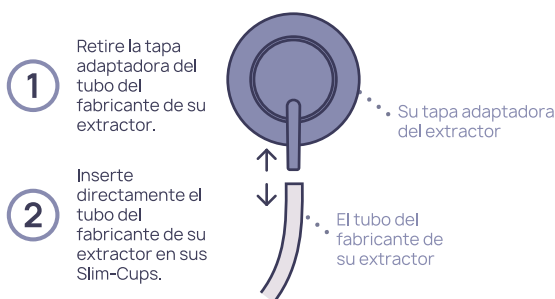

Instalación B: Requiere conector de silicona.

Medela Freestyle Flex, Pump in Style (slimeinate MF), Swing Maxi, Sonata

Pumpables Genie Advanced, Genie Plus

Baby Buddha

